



Stół operacyjno-zabiegowy

SZ-01



Produkt został wykonany z materiałów,
o właściwościach antybakteryjnych.



Stół operacyjno-zabiegowy

SZ-01

Przeznaczenie

Przeznaczony jest do przeprowadzania zabiegów opatrunkowych, prostych zabiegów chirurgicznych, ortopedycznych, proktologicznych, ginekologicznych, laryngologicznych, urologicznych itp.

Pełna oferta wyposażenia przedstawiona jest w katalogu „Wyposażenie stołów operacyjnych”.



Budowa standardowa

- Konstrukcja stołu umożliwia monitorowanie pacjenta i wykonywanie zdjęć RTG w czasie trwania zabiegów i operacji.
- Przejezdna podstawa z centralną blokadą wszystkich kół pozwala na łatwe ustawienie i zablokowanie stołu.
- Materace bezszwowe wykonane z miękkiej pianki poliuretanowej oraz powierzchnie metalowe stołu są łatwe do czyszczenia i odporne na działanie środków dezynfekujących.

Funkcje i napędy

- Przejezdna podstawa z centralną blokadą wszystkich kół pozwala na łatwe ustawienie i zablokowanie stołu.
- Wysokość blatu regulowana jest przy pomocy pompy nożnej. Ustawienie segmentów blatu wspomagane jest sprężynami gazowymi.

Dostępne wersje SZ-01:

- Stół może być wykonany w wersji
- lakierowanej (SZ-01.0)
 - ze stali nierdzewnej (SZ-01.5).

Przechył Trendelenburga



Przechył anty-Trendelenburga





Przykłady zastosowań



Stół SZ-01 z poręczami bocznymi WS-32.5



Stół SZ-01 z podglówkiem specjalistycznym WS-21.5




Stół SZ-01 z przystawką ginekologiczną WS-28.0 i podkolannikami WS-05.5



Stół SZ-01 z przystawką proktologiczną WS-30.0



Pozycja fotelowa

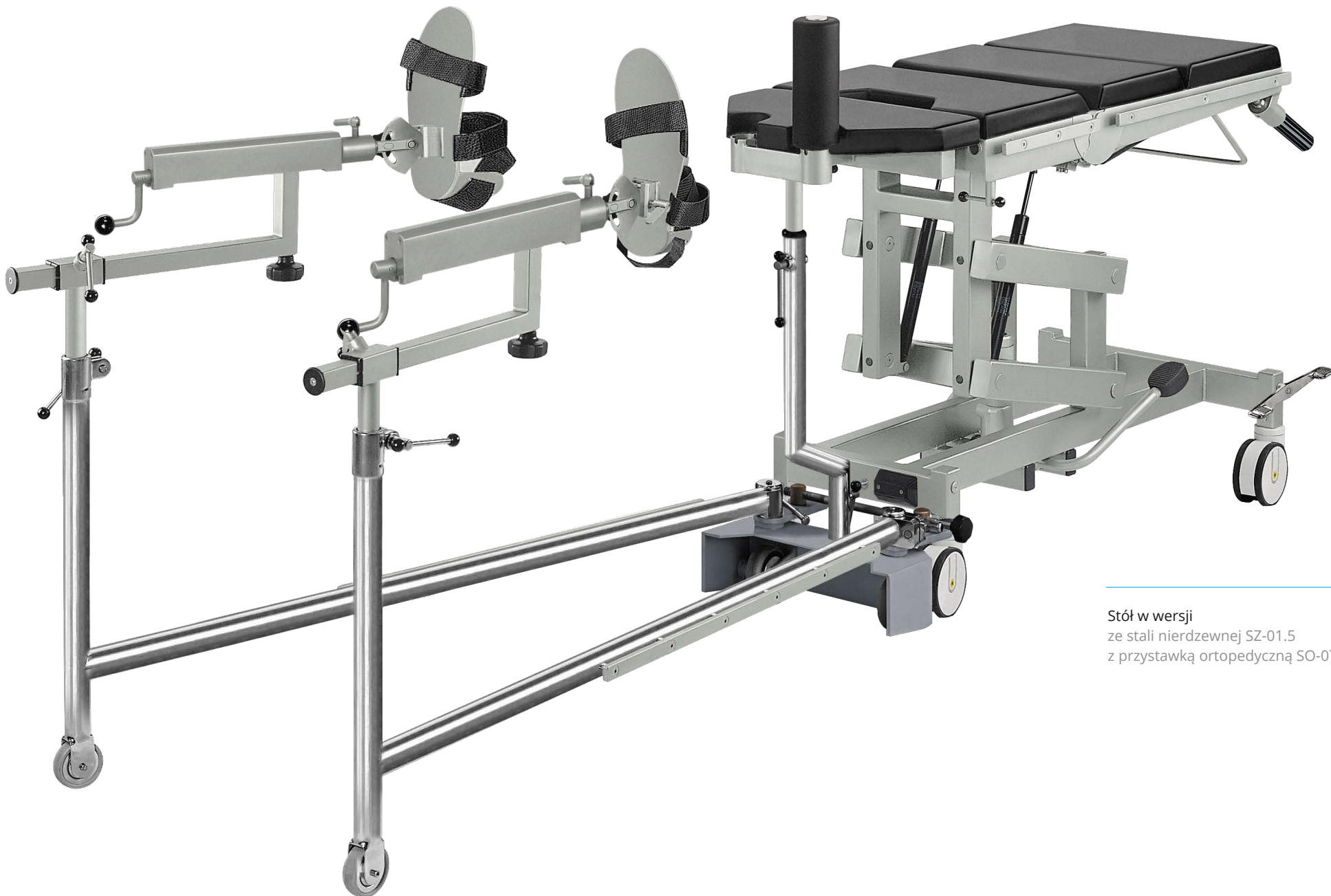

Stół w wersji ze stali nierdzewnej SZ-01.5 z przystawką ortopedyczną SO-07.2



Operacje głowy i szyi




Standardowe funkcje i rozwiązania

Możliwość zdejmowania segmentów blatu stołu




Przepuszczalność promieni RTG

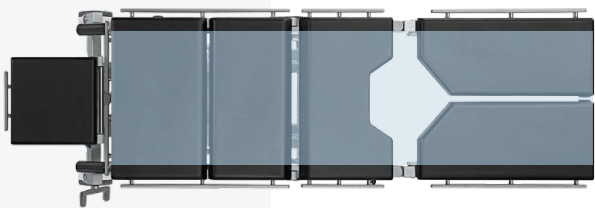

Zakres przepuszczalności promieni RTG za pomocą tacy RTG



Gniazdo podglówka specjalistycznego

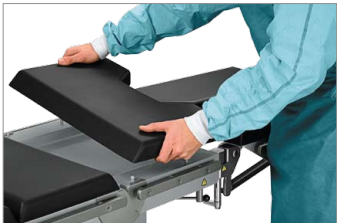

Możliwość zdejmowania materaca


Proponowane wyposażenie



Podglówek specjalistyczny WS-21.5 i podpórka pod rękę lekarza WS-22.5



Materac wypełniający WS-67.0

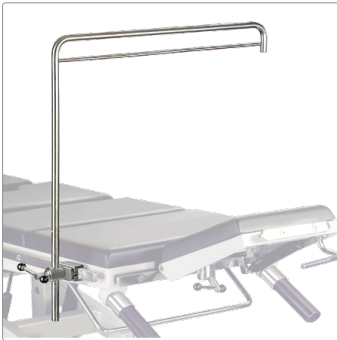

Ramka ekranu WS-01.5



Walek podporowy WS-08.5



Uchwyt kasety RTG WS-12.0



Uchwyt boczny RTG WS-33.0



Oparcie barkowe WS-06.5



Oparcie uda WS-03.5





Taca RTG WS-11.5

Pełna oferta wyposażenia przedstawiona jest w katalogu „Wyposażenie stołów operacyjnych”.

Dane techniczne

Całkowita długość stołu	2020 mm
Całkowita szerokość stołu	550 mm
Minimalna wysokość blatu	810 mm
Maksymalna wysokość blatu	1050 mm
Pozycja Trendelenburga	25°
Pozycja anti-Trendelenburga	12°
Kąt nachylenia oparcia pleców	-40° do +80°
Kąt nachylenia podglówka	-40° do +50°

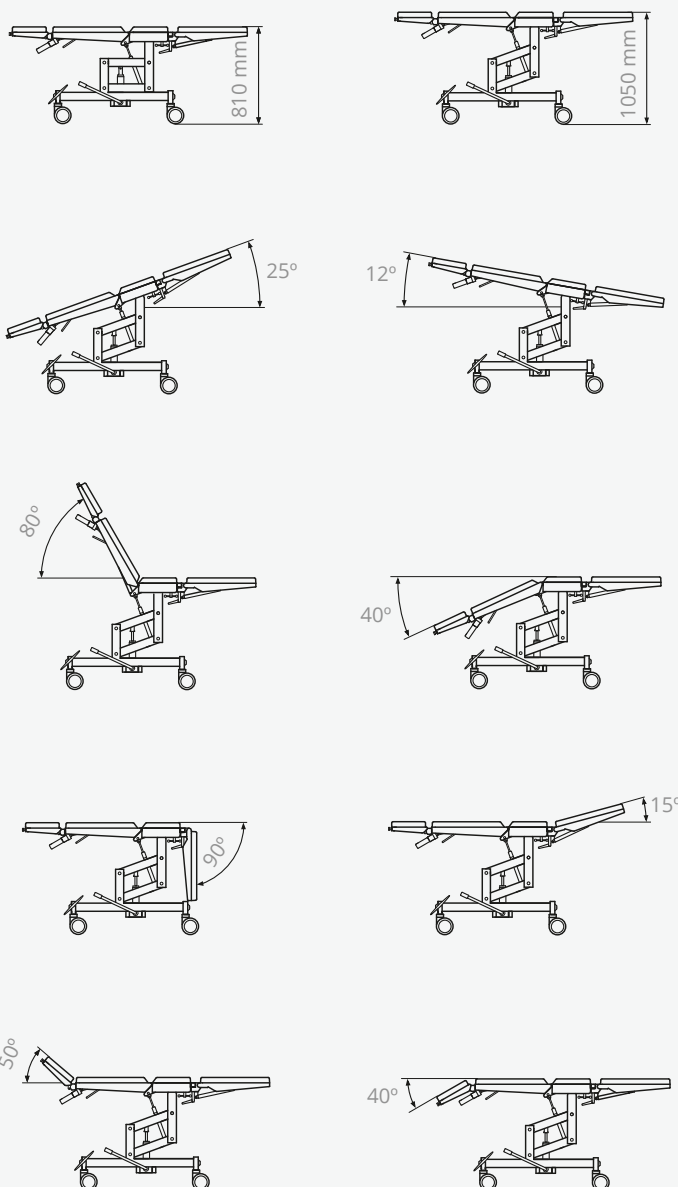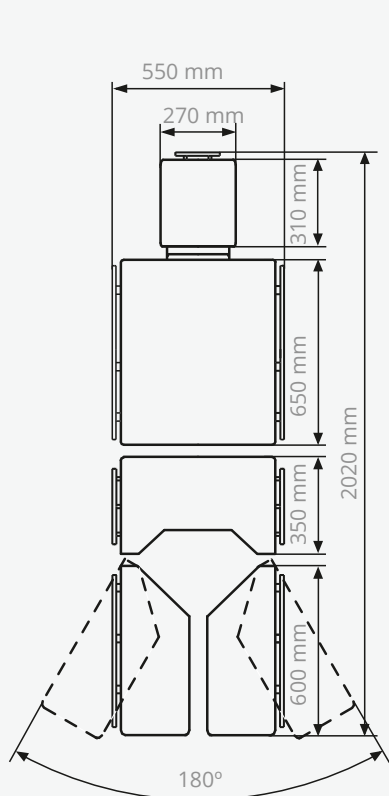

Famed Żywiec Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 1
34-300 Żywiec, Polska

Centrala:
tel.: +48 33 866 62 00
fax: +48 33 475 58 90

Dział Handlowy:
tel.: +48 33 866 63 08
tel.: +48 33 866 63 10
tel.: +48 33 866 63 12
tel.: +48 33 866 63 17
fax: +48 33 861 30 79

market.famed@famed.com.pl
www.famed.com.pl



Produkt spełnia wymogi Europejskiej Dyrektywy
MDD 93/42/EEC dotyczącej wyrobów medycznych
oraz Ustawy o wyrobach medycznych

Zastrzega się możliwość modyfikacji w wyniku postępu technicznego

